

EZYPRESS正压固相萃取装置

EZYPRESS正压固相萃取装置是通过该装置内的正压气源来控制SPE小柱流速的大小，并且可以吹干小柱，保证了每根小柱在活化、上样、吹干、淋洗和洗脱过程中具有良好的重现性。



EZYPRESS™ 48

主要特点

- 模块化设计。
- 一次性处理高达48个样品。
- 每个孔位独立控制，可只启用其中的部分孔位。
- 适用1mL，3mL，6mL等不同规格SPE柱。
- 适用12x75mm，13x100mm，16x100mm等不同规格收集管。
- 正压供应：压缩空气，氮气或其他惰性气体。
- 可通过调节气压的大小调节不同的活化或洗脱流速。
- 气流分布均匀，保证了每个SPE柱相同的流速，保证了良好的回收率和重现性。

EZYPRESS主要用于食品、药品、血液、尿液、土壤等液体样品或固体半固体样品提取液中痕量有机物的富集或净化，同时大批量处理提高样品萃取的效率。

针对不同的应用领域，具有不同型号的固相萃取装置可选

图片信息

型号特点




EZYPRESS™ 96

- 可处理1至96个1mL SPE柱
- 双气流调节阀，可为萃取和柱干燥提供两个不同的压力

图片信息

型号特点

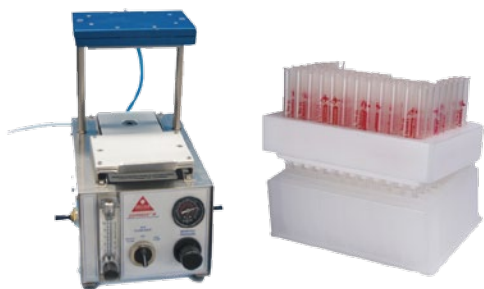

EZYPRESS™ HT96

- 适用96孔板
- 处理1至96个样品
- 双气流调节阀，可为萃取和柱干燥提供两个不同的压力



EZYPRESS™ HT192

- 可放置2个96孔板
- 可处理1至192个样品
- 双气流调节阀，可为萃取和柱干燥提供两个不同的压力



北京

地址：北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号都会国际A座19层K室

电话：010-85861201

传真：010-85861569

上海

地址：上海市浦东新区张江高科园张江路185号圣御大厦310A室

电话：021-38751575

传真：021-38760115

厦门

地址：厦门市火炬高新区创业园伟业楼N206室

电话：0592-5800190

传真：0592-5800191

湖北

地址：湖北省武汉市洪山区武珞路442号中南国际城D2-2201

电话：027-87257286

传真：027-87257286

应用技术支持及培训中心

地址：厦门市火炬高新区创业园伟业楼N305室

电话：0592-5711722

传真：0592-5711721

服务热线：400-885-1816 | 网址：www.reeko.cn | 邮箱：info@reeko.cn